


Danis stent

De Danis stent is een unieke, self-expandable gecoverde slokdarmstent die als enige officieel geïndiceerd is om bloedingen van slokdarmvarices te stoppen. De afmetingen en de hoge expansiekracht vormen een zeer effectieve en gemakkelijke oplossing voor stabilisatie van de patiënt. Het plaatsingssysteem is zo ontwikkeld dat de stent in een acute situatie kan worden geïmplantéerd zonder endoscopische- of röntgencontrole. Aanbevolen door verschillende internationale procedures en richtlijnen voor de behandeling van slokdarmvarices.

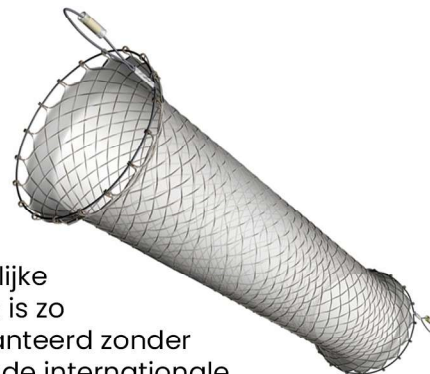

Indicatie

De Danis-stent is bedoeld voor patiënten van 16 jaar en ouder en is geïndiceerd om acute en/of refractaire bloedingen van slokdarmvarices te stoppen.

Kenmerken

Door het open lumen van de slokdarm kunnen endoscopische procedures worden uitgevoerd en kan de patiënt eten. Het unieke ontwerp van de stent is aangepast aan de slokdarmperistaltiek en vermindert het risico op migratie. De klinische en technische werkzaamheid van de stent ligt tussen de 95 en 100%. De stent geeft patiëntstabilisatie en hemostase gedurende 7 dagen na implantatie.

Implantatie

Het plaatsingssysteem is uitgerust met een schaalverdeling en een ballon voor nauwkeurige plaatsing van de stent. De stent wordt steriel geleverd in een plaatsingssysteem. Verder bevat de verpakking een ultrastijve voerdraad van 0,035" x 260 cm en een injectiespuit van 50 ml.



Danis Extractor

De Danis Extractor is ontworpen voor het betrouwbaar en atraumatische verwijderen van slokdarmstents en stents die gemigreerd zijn naar de maag. Dankzij de compatibiliteit met de ELLA Extractor wordt het risico op bloedingen bij de verwijdering van een Danis stent aanzienlijk verminderd. Een gecontroleerde verwijderingsprocedure kan het risico op herhaalde bloedingen verkleinen en versterkt daarmee de klinische effectiviteit van de Danis stent als tijdelijke oplossing voor acute varicesbloedingen.



Artikel nr.	Omschrijving	Aantal
019-08S-25-135-B	Danis stent 25 mm x 135 mm	1 stuks
015-01-28-1000	Extractor voor ELLA Esophageal stents	1 stuks